



Orange Data

C/ Dolores Ibarruri, 1
Edificio Europa, 3º J
Benalmádena
29631 Málaga

Tlf. 952.566.893 952.564.961
Fax 952.566.893

info@orange-data.com
www.orange-data.com

Ref. 10.406 LabData Mobile

Orange Data

LabData Mobile

Introducción

LabData Mobile es un software para PDA y Móviles que gestiona eficientemente toda la información necesaria en la toma de muestras in-situ para **su Laboratorio**.

Con esta tecnología **su Laboratorio** también automatiza la recepción de las muestras, la calidad en la gestión del tratamiento de la información y estará preparado para realizar los ensayos de forma inmediata, sin cuellos de botella en la entrada de muestras.

No solo conseguirá mayor velocidad en dichos procesos, si no que además mejorara su sistema de calidad en la recepción de muestras evitando errores de transcripción.

Con **LabData FQM LIMS** y **LabData Mobile su Laboratorio** dispondrá de las últimas tecnologías y automatización que siempre había soñado.



Operativa de trabajo en 3 pasos

1.

Labdata
FQM



Sincronización/Carga de PDA. LabData Mobile recibe los datos de configuración obtenidos de la base de datos de LabData FQM (clientes, centros, tipos de muestra, tipos de envase, etc.)

2.



Ya puede empezar a realizar los muestreos con su PDA y LabData Mobile

3.

Labdata
FQM



Sincronización/Descarga de PDA. LabData Mobile envía toda la información de los muestreos hacia LabData FQM

Características principales

Identificación del Muestreador. Permite la identificación de cada usuario/muestreador que trabaje con la PDA.

Gestión de Muestras individuales. Permite la creación, edición y borrado de registros de peticiones muestreadas, permitiendo e indicando para cada muestra los siguientes datos: referencia de muestra, cliente, empresa, tipo de muestra, observaciones sobre la muestra, muestreador, protocolo a analizar y la introducción de los parámetros de medición in-situ, etc.

Gestión de Muestras repetidas. Permite la creación automática de un conjunto de muestras con las mismas características, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Configuración y preferencias. Datos de los registros por defecto o más usuales ya registrados, evitando tener que introducir los datos más usuales en sus muestreos.


Información y datos del cliente. Busque y consulte la ficha del cliente, dirección, teléfonos, contacto.

Acceso y consulta a otra información. Empresas, puntos de muestreo, tipos de muestra, envases utilizados, conservación de la muestra, método de muestreo, protocolos analíticos, parámetros medición in-situ, etc.

Sincronización/Carga. Se importan todos los datos de trabajo en LabData Mobile desde LabData FQM.

Sincronización/Descarga. Se exportan desde LabData Mobile hacia LabData FQM automáticamente los datos de las muestras recogidas, de esta forma puede continuar con la gestión LabData Fqm en sus múltiples tareas (preparación de hojas de trabajo, muestras pendientes de procesar, etc.) evitando pérdidas de tiempo y errores en el registro manual.

LabData Mobile trabaja sobre la PDA o dispositivo móvil de forma independiente y **sin ser necesario ningún tipo de conectividad**/tarifa de datos.

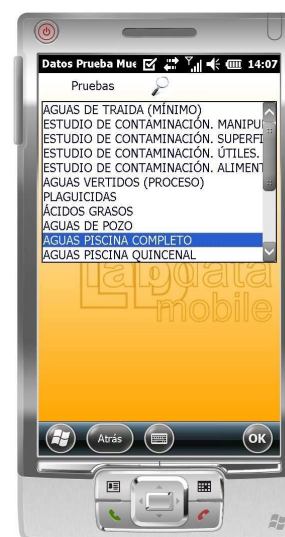

Licencias

LabData Mobile se deberá contratar con licencias individuales para cada dispositivo PDA.

Requerimientos

LabData Mobile se podrá usar cualquier PDA del mercado, profesional, semiprofesional, pda básica, pda-movil, etc. siempre y cuando tenga las siguientes 2 características:

- Sistema operativo Windows Pocket Pc 2003 o Windows Mobile 5, 6, 6.1 o 7.
- Resolución de pantalla mínimo: 240 X 320

